

Endless Love 

To Guard The New Life Safe



# BM-100C

Bilirrubinómetro transcutáneo

 0123  
Stock code [300314]

  
ATAL INNOVATIONS,S.L

  
DAVID


## Introducción del producto

### ■ Transmisión inteligente, eficiente y fácil de usar

Pantalla táctil a color de 3.0 pulgadas, los caracteres grandes se muestran claramente y se puede leer el valor medido rápidamente; Se pueden mostrar múltiples datos de medición en la misma pantalla, y se puede almacenar la información de múltiples pacientes simultáneamente para realizar la gestión de datos de múltiples pacientes;

Lector de códigos de barras configurable, admite códigos QR y escaneo de códigos de barras, y puede verificar e ingresar de manera rápida y precisa la identificación de la enfermera y el paciente;

Equipado con una interfaz de comunicación de datos Micro USB, conectado con una PC para la salida de datos, que es conveniente para que el personal médico registre y administre.

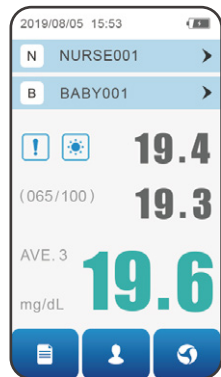

### ■ Larga duración de batería, respetuoso con el medio ambiente y duradero

Equipado con una base de carga, la batería recargable incorporada se puede cargar durante mucho tiempo y puede medir continuamente 2000 veces después de estar completamente cargada;

Equipado con lámpara de flash de xenón, larga vida útil ( $\geq 150,000$  mediciones);

El soporte de carga tiene su propia función de pantalla de inspección, no se necesitan consumibles de una sola vez y se ahorra el costo de revisión del equipo.

### ■ Medición precisa, detección rápida

Puede ayudar a establecer una detección eficaz, identificar con precisión a los niños con ictericia de alto riesgo y cumplir con las últimas pautas de intervención clínica;

Puede realizar mediciones continuas de múltiples pacientes sin calibración repetida;

Con la función de medición promedio, se pueden configurar de 1 a 5 métodos de medición promedio para garantizar la precisión de los resultados de la medición;

Las dos unidades de medida mg/dL y  $\mu\text{mol/L}$  se pueden cambiar y mostrar.

Lector de  
códigos de barras

comprobador de luz  
integrado



## Configuración básica

Consta de host, base, adaptador de corriente, lector de códigos de barras e interfaz de comunicación de datos USB.



Ningbo David Medical Device Co.,Ltd



ATAL INNOVATIONS S.L

Atal Innovations S.L  
Iturriondo 18 Edif F Local 1 P.A.E Ibarbarri  
48940 - Leioa - Bizkaia  
info@atalinnovations.com - www.atalinnovations.com