

iReach Magnum

Endograpadora
motorizada de corte



Articulación
de 55°



12 Disparos
Potenciales



Estabilidad
Superior



Compresión
superior



Nueva Hoja
en Cada
Cartucho

ENDO III Plataforma Alimentada

Los fundamentos del sistema de ENDO III Grapadoras ahora se reinventan y reensamblan en una nueva entidad.

La compresión de la firma del tejido junto con el disparo suave produce una experiencia sin precedentes, abriendo nuevas posibilidades en el campo quirúrgico.

Compresión superior combinada con máxima seguridad



Compresión superior que maximiza la compresión, reduciendo el daño al tejido y la mejor formación de grapa.



Retroalimentación de audio cuando se alcanza la precompresión de **15 segundos**.




Botón de liberación de seguridad, interruptor de marcha atrás manual garantizando la máxima seguridad

Construido Para Funcionar

55°

Hasta 55° de articulación en ambas direcciones en 5 marchas.

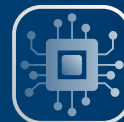

Algoritmo avanzado en el chip modular con precisión de la potencia de salida para lograr efectos óptimos.

12
disparos

Cada batería empaquetada previamente con el asa permite el disparo suave.



La luz indica el estado de la batería.



Utilice la palanca de articulación para activarla sin necesidad de su aplicación en los tejidos.

IM45AS/IM45AM/IM45AL compatible con

REC 45 GRA

REC 45 WHT

REC 45 BLU

REC 45 GLD

REC 45 GRN

REC 45 BLK

IM60AS/IM60AM/IM60AL compatible con

REC 60 GRA

REC 60 WHT

REC 60 BLU

REC 60 GLD

REC 60 GRN

REC 60 BLK

ENDO III Cartucho



Una amplia gama de recargas de uso individual que ofrece una excelente experiencia de división de tejido suave, compatible con cartucho grapado de 45 o 60 mm.



Variedad de cartucho
Hay 6 grapadoras de 45 mm y 60 mm de altura disponibles para cualquier situación quirúrgica



Hoja de cartucho desechable
Asegura cortes limpios y elimina metástasis del tumor



Todos los cartuchos, incluidos los verdes y los negros, pasan a través de trocares de 12mm.

Código de producto	Color de cartucho	Altura de grapa abierta	Altura de grapa cerrada	Grosor de tejido	Número de grapas	Número de fijas grapadas	Cant./Caja
REC 45 GRA	Gray	2.0 mm	0.75 mm	Vascular/ Thin	66	6	12
REC 60 GRA					90		
REC 45 WHT	White	2.5 mm	1.0 mm	Vascular/ Thin	66		
REC 60 WHT					90		
REC 45 BLU	Blue	3.5 mm	1.5 mm	Regular	66		
REC 60 BLU					90		
REC 45 GLD	Gold	3.8 mm	1.75 mm	Regular	66		
REC 60 GLD					90		
REC 45 GRN	Green	4.1 mm	2.0 mm	Regular/ Thick	66		
REC 60 GRN					90		
REC 45 BLK	Black	4.4 mm	2.2 mm	Regular/ Thick	66		
REC 60 BLK					90		



CONTACT US

ATAL INNOVATIONS S.L.

C/ Iturriondo N° 18 Edif F Local 1,2- P.A.E
Ibarrabari, 48940 Leioa (Bizkaia- España)

T +34-946855600

E_mail: info@atalinnovations.com

www.atalinnovations.com